


▶ PUNTAS INSERTOS ULTRASONIDOS

RUMAR
mayorista dental

PARTE 1

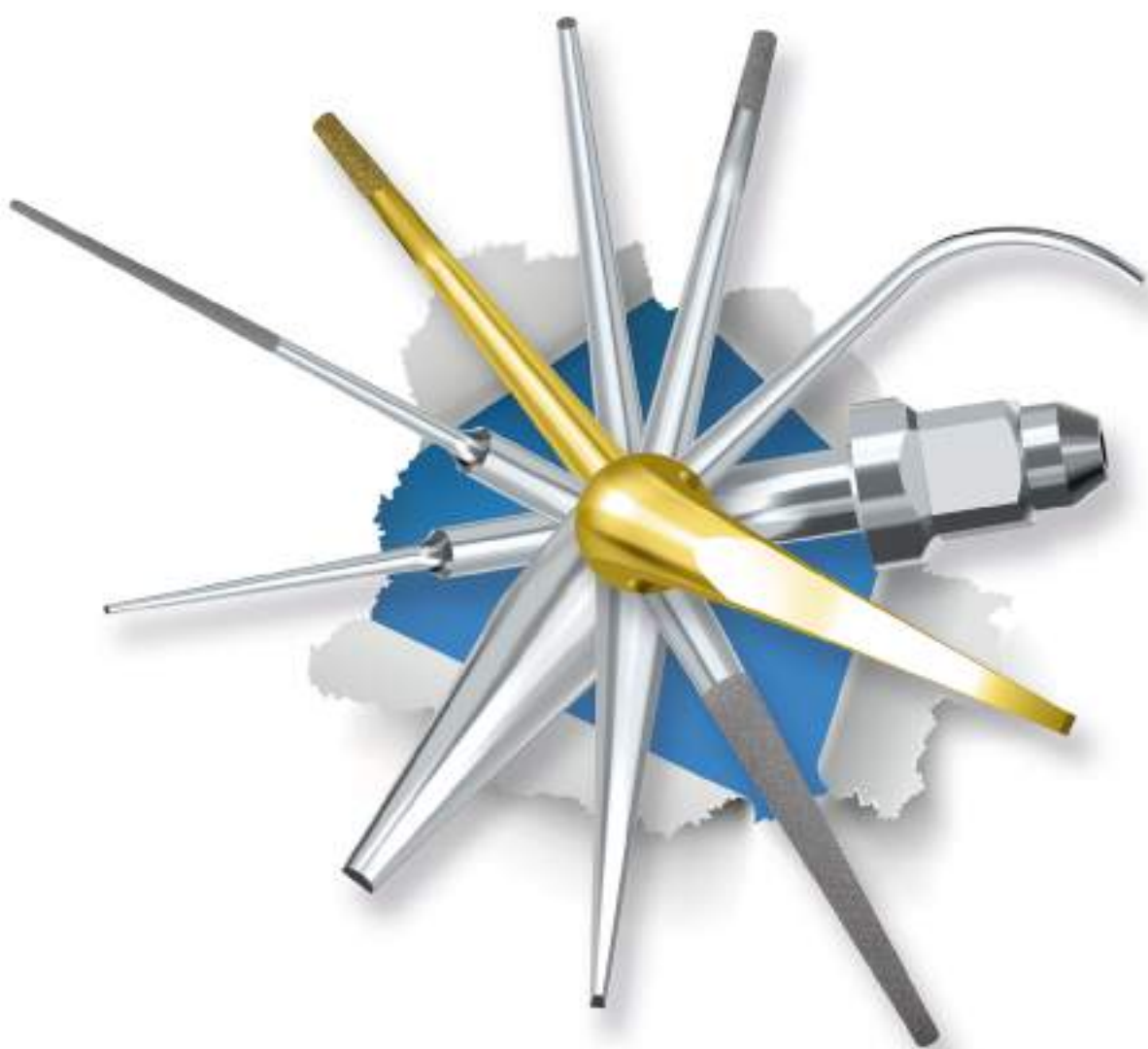

+250 MODELOS COMPATIBLES


¡SIEMPRE EN STOCK, ENTREGA EN 24 HORAS!



PU ▶ PUNTAS / INSERTOS ULTRASONIDOS

¿ CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA ?

■ Profilaxis	■ Especial
■ Perio	■ Cirugía
■ Endo	◆ Diamantada
■ Tratamiento Caries	■ Ti Baño de Titanio

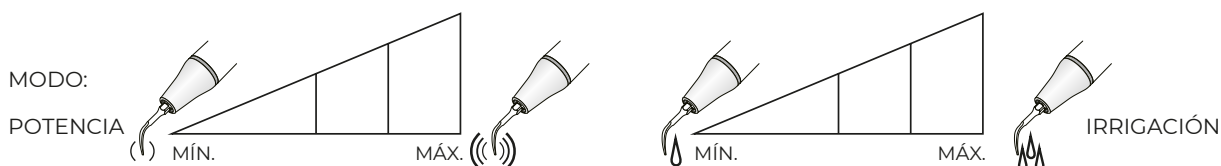

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ANTERIORES:

MODO X indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.

- **G:** Profilaxis
- **P:** Periodoncia
- **E:** Endodoncia

POTENCIA

- La primera cuadrícula indica que la potencia es del 0 - 30% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La segunda cuadrícula indica que la potencia es del 30% - 60% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La tercera cuadrícula indica que la potencia es del 60% - 100% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.

IRRIGACIÓN (Volumen de agua)

- La primera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 0 - 30%.
- La segunda cuadrícula indica que el volumen de agua es del 30% - 60%.
- La tercera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 60% - 100%.

COMPATIBILIDAD

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - S: Rosca tipo S | - A: Amdent® y LM® |
| - E: EMS® | - MEC: Mectron® |
| - KS: KaVo® Soniflex 2000 | - KPI: KaVo® Piezolutux |
| - SIR: Sirona® | - KP2: KaVo® PiezoLED |

NUEVO



Kit A-C Castellucci

Acabado de la cavidad de acceso

Por: **Dr. Arnaldo Castellucci**



Este kit diseñado por el Dr. Arnaldo Castellucci y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido especialmente diseñado para realizar el **acabado de las paredes de la cavidad de acceso y la localización de la entrada de los conductos**. Este kit está dirigido tanto a **endodoncistas** como a **odontólogos generales** que deseen obtener resultados superiores con un mínimo esfuerzo.

Descripción:

Punta ED51 (AC1) / E51: Acabado de las paredes de la cavidad de acceso.

Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.

Punta ED52 (AC2) / E52: Localización del canal MB2.

Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, **localiza y reubica la entrada del canal MB2**. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Punta ED53 (AC3) / E53: Eliminación de calcificaciones y postes de fibra.

Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de **postes de fibra**.

Punta ED54 (AC4) / E54: Eliminación de postes metálicos.

Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Punta ED55 (AC5) / E55: Acabado del suelo de la cámara pulpar.

Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.

Consejos generales:

- **Recomendada** su utilización con una potencia máxima de entre el 60 y 90% de la unidad ultrasónica, dependiendo de la punta.
- **Comprobar** que las roscas de la pieza de mano son correctas (EMS o tipo S).
- **Alternar los modos seco e irrigado** según sea necesario para conseguir una mayor precisión y refrigeración.

Este KIT INCLUYE:

- ED51 (AC1) / E51
- ED52 (AC2) / E52
- ED53 (AC3) / E53
- ED54 (AC4) / E54
- ED55 (AC5) / E55
- Soporte 6 puntas



NUEVO

Ref.: 28-ACDTE

Rosca Tipo S

Ref.: 28-ACWP

Rosca tipo EMS®



Kit Azim

Retro-preparación

Por: **Dr. Adham Abdel Azim**

Este kit diseñado por el Dr. Azim y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, es una colección PREMIUM de puntas ultrasónicas especialmente diseñadas para lograr precisión y eficacia en los procedimientos de **endodoncia retrógrada**. Este kit proporciona instrumentos especializados adaptados para la **cirugía apical**, la **preparación retrógrada** y un mejor acceso a las zonas anatómicas difíciles.



NUEVO

Descripción:

ED19D (AZ1-E) / E19D.

Punta recta diseñada para crear cavidades retrógradas precisas en conductos rectos. Ideal para un corte eficaz y controlado en zonas apicales accesibles.

ED20D (AZ2-E) / E20D.

Punta curva para preparaciones retrógradas en canales con ligeras curvaturas. Mejora el acceso y la visibilidad en casos anatómicamente difíciles.

ED23D (AZ3-E) / E23D.

Punta cónica y angulada para preparaciones retrógradas en conductos de curvatura moderada a severa. Proporciona precisión en espacios restringidos cerca del ápice radicular.

ED39D (AZ4-E) / E39D.

Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.

ED40D (AZ5-E) / E40D.

Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.

ED41D (AZ6-E) / E41D.

Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada. Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.

Aplicaciones:

- **Preparación de obturaciones retrógradas** durante cirugías apicales.
- **Limpieza y modelado de cavidades apicales** para mejorar el sellado.
- **Eliminación eficaz de tejido infectado** y restos en el ápice radicular.
- **Calentamiento y condensación de materiales de obturación** retrógrados para un sellado óptimo.

Este KIT INCLUYE:

- ED19D (AZ1-E) / E19D
- ED20D (AZ2-E) / E20D
- ED23D (AZ3-E) / E23D
- ED39D (AZ4-E) / E39D
- ED40D (AZ5-E) / E40D
- ED41D (AZ6-E) / E41D
- Soporte 6 puntas



NUEVO

Ref.: **28-AZIMDTE**

Rosca Tipo S

Ref.: **28-AZIMWP**

Rosca tipo EMS®




Kit BFRT

Eliminación de puntas rotas

Por: **Dr. Yoshi Terauchi**

Este kit diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado específicamente para facilitar la **ampliación del canal** y la **extracción de limas rotas** durante los procedimientos endodónticos. Este kit ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar cada una de sus puntas durante las distintas etapas del proceso, garantizando la máxima eficiencia y seguridad.

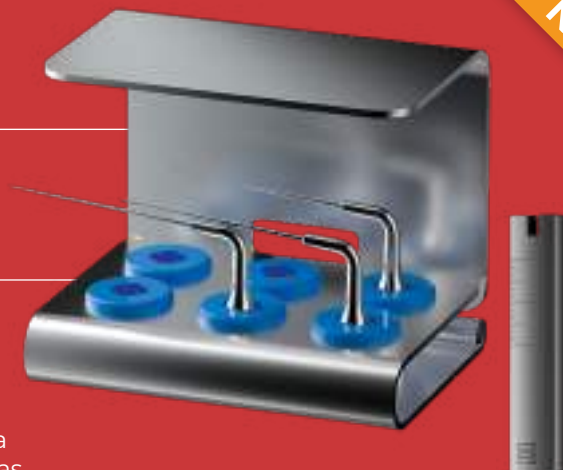

NUEVO

Descripción:

1- Ampliación del canal hasta la lima rota y abocardado del canal.

Utilizar una fresa Gates Glidden n.º 3 para ampliar el canal hasta la lima rota y cepillarla contra la pared exterior para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea inferior a 15 grados.

Utilizar una lima NiTi cónica n.º 60/02 para ampliar el canal hasta la lima rota y cepillarla contra la pared externa para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea superior a 15 grados.

2- Puntas ED88 (Katana-H) y ED89 (Katana-V): Crea un espacio semicircular de 90 grados.

Estas puntas están ideadas para crear un espacio fino entre la pared interna y la lima rota, utilizando la superficie plana sobre la lima rota desde la pared interior, y activando los ultrasonidos al colocarlas en el espacio. La profundidad del espacio debe ser al menos un tercio de la longitud de la lima rota. Si la curvatura es superior a 30 grados, es recomendable colocar una gota de aceite de silicona de calidad médica en el canal para facilitar la lubricación y el aflojamiento de la lima rota. La profundidad del espacio en esta condición debe ser al menos la mitad de la longitud de la lima rota.

3- Punta ED87 (TFRK-S):

Amplía el espacio periférico de 90 grados hasta 180 grados.

Utilizada para ampliar el espacio semicircular de 90 grados a 180 grados hasta que la lima rota 'baila' (moviéndose del espacio original a otro) bajo magnificación. En la práctica clínica, la punta se debe utilizar con movimientos de picoteo y pulsación. Se aconseja no presionarla contra el canal y activar los ultrasonidos para evitar su rotura debido a la fatiga cíclica. Para ampliar el espacio lateral, la punta debe ser utilizada con un movimiento de arriba / abajo para cortar dentina, no lateralmente.

4- Una vez finalizada la preparación, la punta de ultrasonidos ED87 (TFRK-S) empleada cuando se hizo 'bailar' la lima rota, debe ser utilizada para realizar intentos de extracción por ultrasonidos. Para lograr la extracción de la lima rota, se debe colocar la punta ultrasónica en el espacio creado en la pared interna y activar los ultrasonidos en un corto vertical dentro del espacio previamente preparado. Si la curvatura del canal es de 30 grados o inferior a 30 grados, se debe rellenar el canal con EDTA al 17%, o si la curvatura del canal es superior a 30 grados debe emplearse aceite vegetal (Ej.: aceite de soja).

Este KIT INCLUYE:

- ED87 (TFRK-S) / E87
- ED88 (Katana-H) / E88
- ED89 (Katana-V) / E89
- Llave
- Soporte 6 puntas



ED87
E87



ED88
E88



ED89
E89

NUEVO

Ref.: **28-BFRTDTE**

Rosca Tipo S

Ref.: **28-BFRTWP**

Rosca tipo EMS®



Kit Talal

Puntas ultrasonidos para endodoncia

Por: **Dr. Talal Al Nahlawi**

Este kit diseñado por el Dr. Talal y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado para dar la solución definitiva a los procedimientos endodónticos más complejos y desafiantes, permitiendo que los dentistas realicen una **limpieza y conformación detallada de los conductos radiculares**, mejorando la eficiencia y los resultados de los tratamientos.



NUEVO

Descripción:

Punta ED1 (TD1) / E1.

Eliminación de calcificaciones y cementos, exposición y extracción de limas rotas.

Punta ED62 (TD2) / E2.

Facilita la irrigación activa y la activación de la irrigación, esenciales para la desinfección eficaz del conducto radicular.

Punta ED18 (TD3) / E3.

Apertura de acceso y refinamiento, detección de orificios del canal y eliminación de calcificaciones.

Punta ED12D (TD4) / E12D.

Eliminación de piedras de pulpa y materiales acumulados en la base de la cámara pulpar.

Punta ED15D (TD5) / E15D.

Eliminación de postes de fibra (coronalmente) y eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del canal.

Punta ED6 (TD6) / E6.

Eliminación de limas rotas y postes de fibra localizados en zonas apicales.

Este KIT INCLUYE:

- ED1 (TD1) / E1
- ED6 (TD6) / E6
- ED18 (TD3) / E18
- ED62 (TD2) / E62
- ED12D (TD4) / E12D
- ED15D (TD5) / E15D
- 6 Limas ultrasónicas con punta de 0,3 mm y conicidad de 2%
- Llave plana
- Soporte 6 puntas



NUEVO

Ref.: **28-TALALDTE**

Rosca Tipo S

Ref.: **28-TALALWP**

Rosca tipo EMS®

ULTRASONIDOS DTE® D600, S6, D5, D7 Y OTROS

Rosca tipo S

DTE®

GD1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GD1
28-5GD1




Ti GD1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GD1T

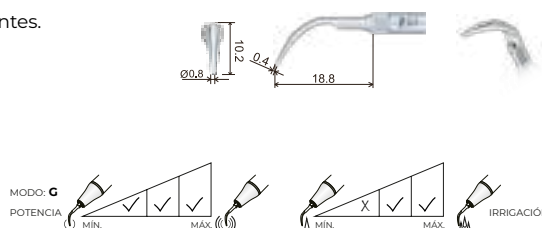



GD2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GD2

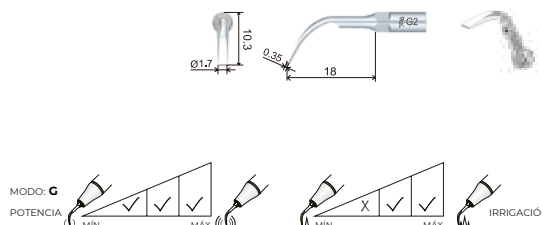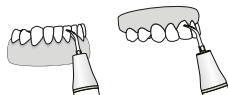



Ti GD2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:

28-GD2T

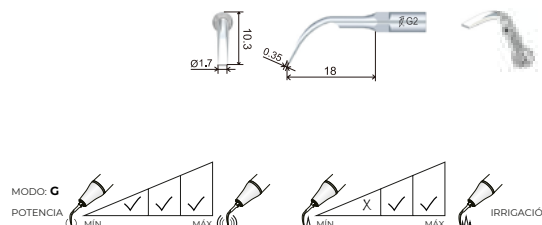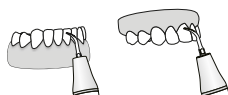



GD3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes,
incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-GD3

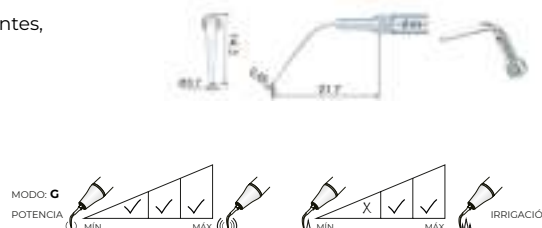
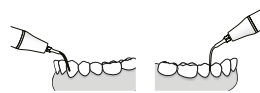


GD4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4

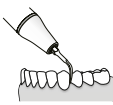
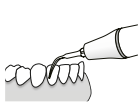


GD4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4T

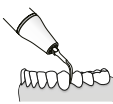
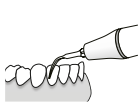


GD5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD5

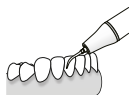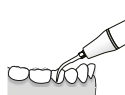


GD6 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-GD6



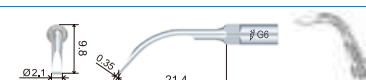


GD7 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.

Ref.:
28-GD7

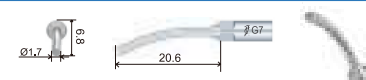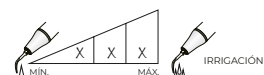
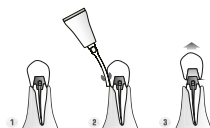


GD8 | Profilaxis, extracción de coronas



Extracción de postes. Alta eficacia ultrasónica para la extracción de las piezas protésicas de difícil extracción.

Ref.:
28-GD8

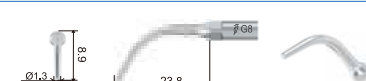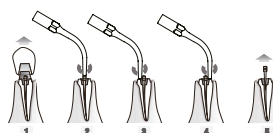

GD10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-GD10




GD10T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:
28-GD10T


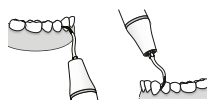


GD12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales



Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-GD12

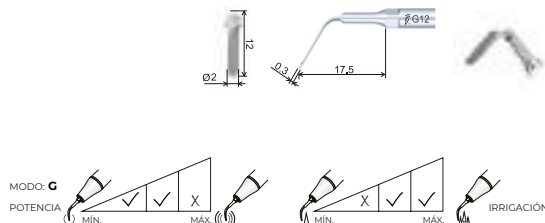
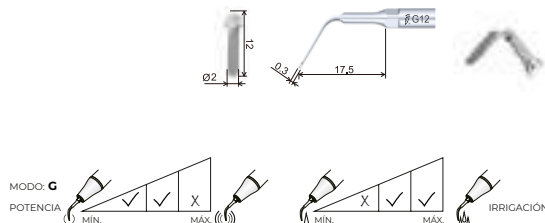


PD1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1

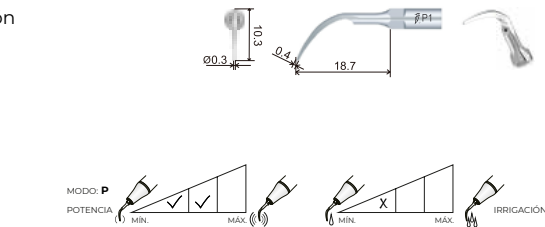
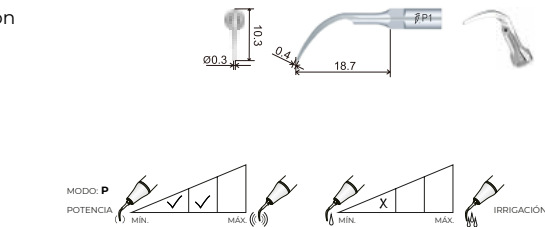


PD1T | Perio, recubrimiento Titanio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1T

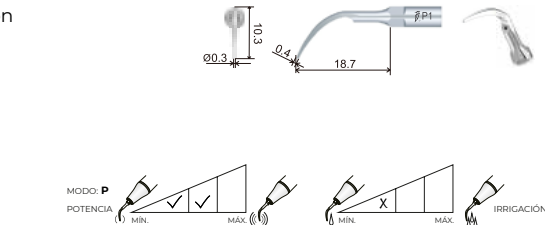
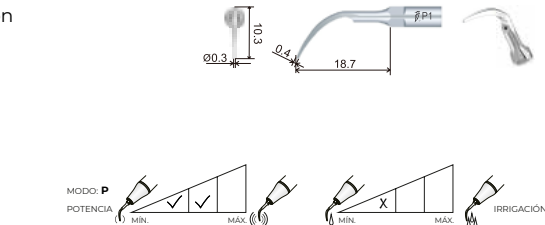


PD2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:
28-PD2L

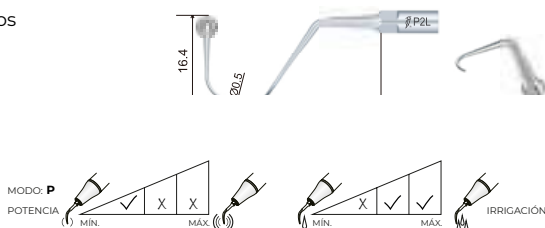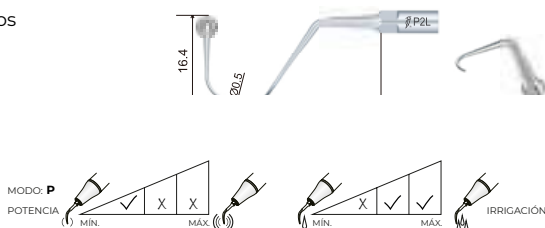



PD2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:

28-PD2R

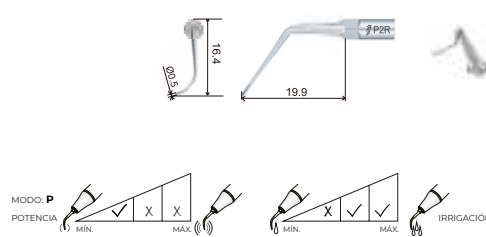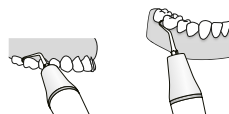


PD3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3

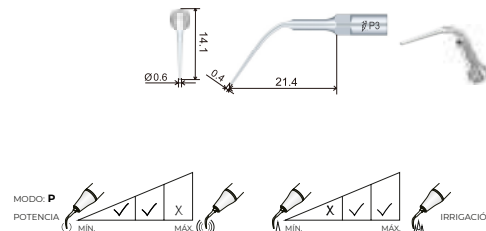


PD3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas



Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:

28-PD3D

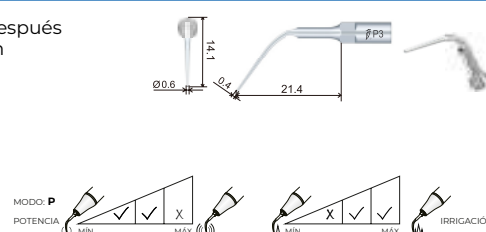


PD3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3T

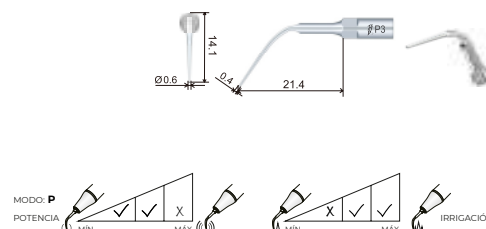



PD4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4

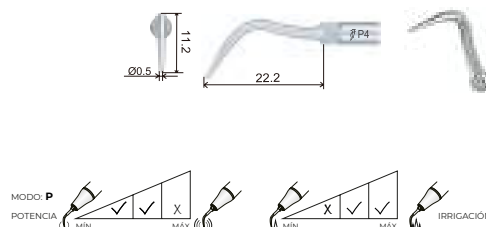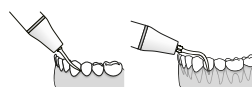



PD4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4T

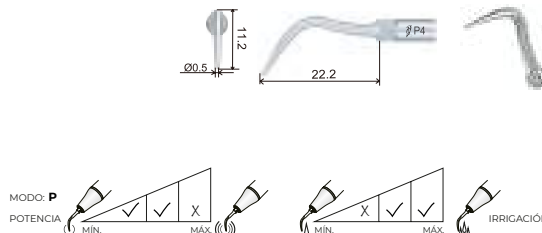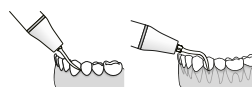


■ PD5 | Perio



Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:

28-PD5

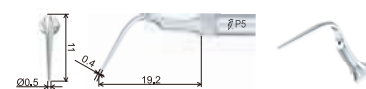


■ PD6 | Perio, bolsas periodontales profundas



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD6

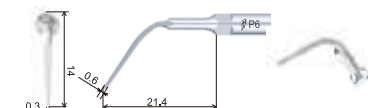



■ PD7 | Perio, depósitos subgingivales



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-PD7

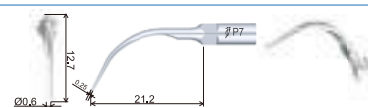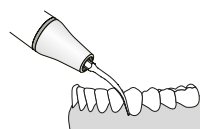



■ PD10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:

28-PD10

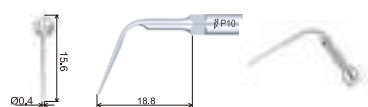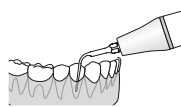



■ PD12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:

28-PD12

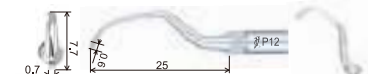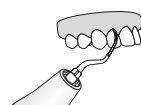

■ ED1 (TD1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)




Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED1

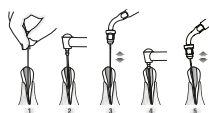



ED2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en molares.

Ref.:

28-ED2

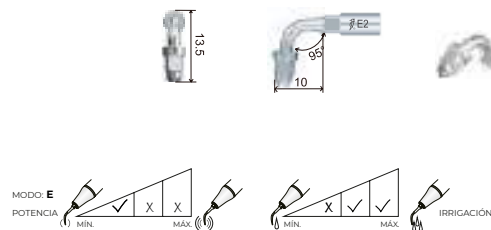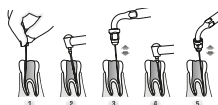

NiTi #15 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITI15

NiTi #20 | Lima Endo

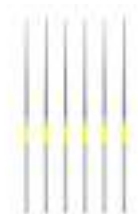

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITI20

NiTi #25 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITI25

NiTi #30 | Lima Endo

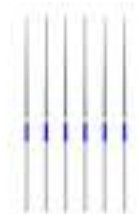

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITI30

NiTi #35 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:


28-NITI35




Ref.:

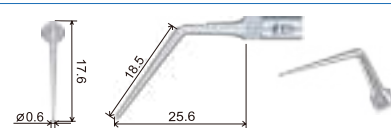


Ref.:

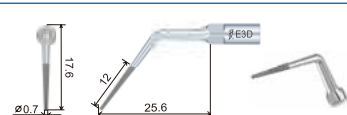


Ref.:

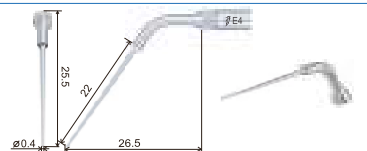


Ref.:

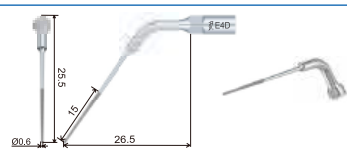

Ref.:

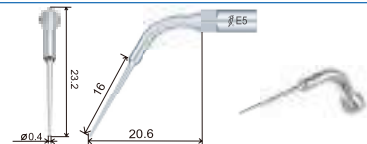

Ref.:

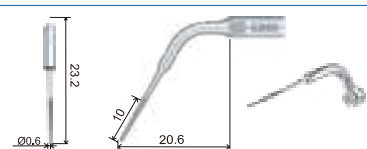

ED6 (TD6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED6

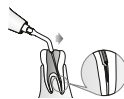



ED7 | Endodoncia, especial cuerpos extraños primer tercio



Delgada y flexible, recomendada para eliminar cuerpos extraños en el primer tercio del canal radicular.

Ref.:

28-ED7

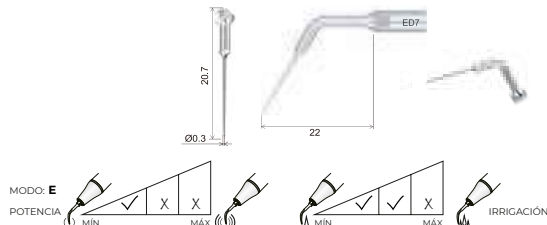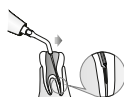


ED10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-ED10

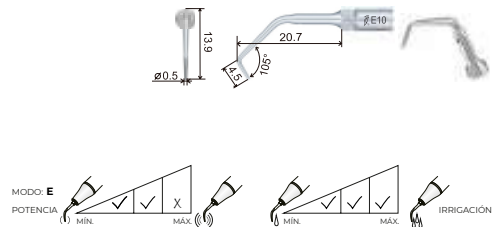


ED10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ED10D

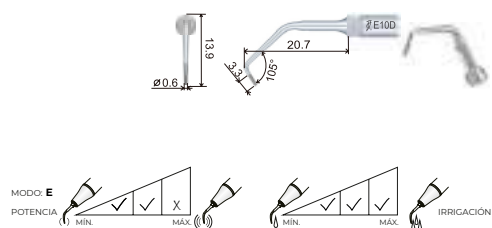



ED11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.

Ref.:

28-ED11

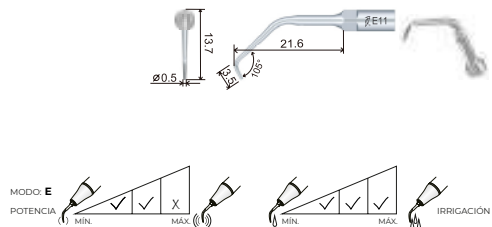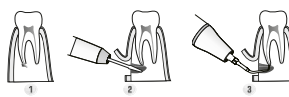



ED11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares. La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.

Ref.:

28-ED11D

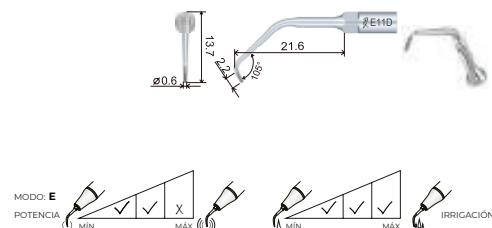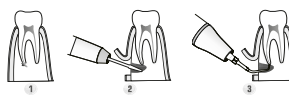

ED12D (TD4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED12D





ED14 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED14

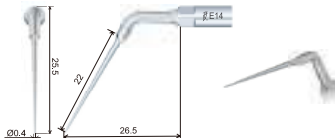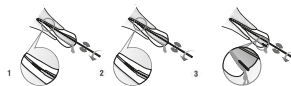



ED14D | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-ED14D

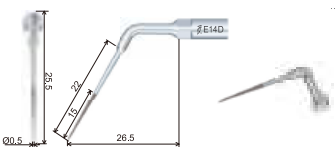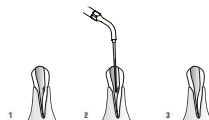



ED15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED15

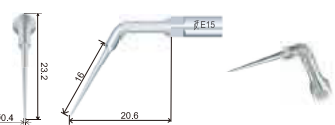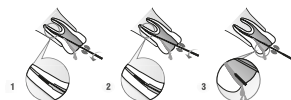

ED15D (TD5) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas




Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED15D

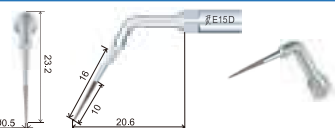

ED16 | Endodoncia





Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.

El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar.

Ref.:

28-ED16

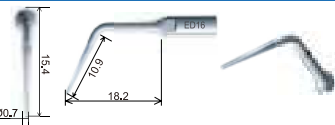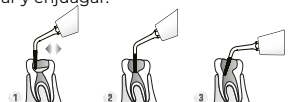


ED18 (TD3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas



Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte. El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-ED18

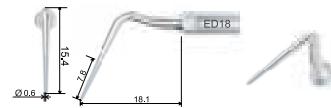



ED19D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10. **Incluida en Endo Kit Azim.**

Ref.:

28-ED19D

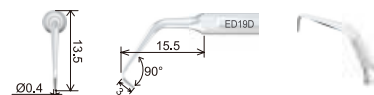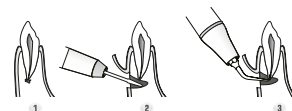



ED20D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10. **Incluida en Endo Kit Azim.**

Ref.:

28-ED20D

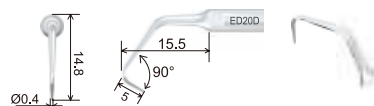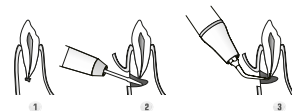


ED21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la izquierda



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares. Doblada hacia la izquierda. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-ED21LD

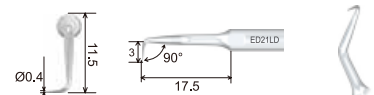



ED21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la derecha



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares. Doblada hacia la derecha. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-ED21RD

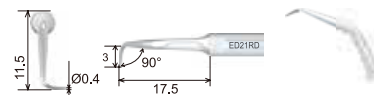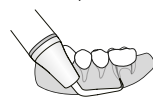

ED23D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación (casos complicados)



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10. **Incluida en Endo Kit Azim.**

Ref.:

28-ED23D





ED24D | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 5mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.

Ref.:

28-ED24D

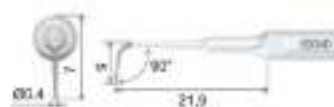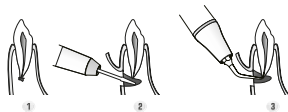

ED39D | Endodoncia, retropreparación



Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.

Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:

28-ED39D

ED40D | Endodoncia, retropreparación



Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.

Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:

28-ED40D

ED41D | Endodoncia, retropreparación



Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada. Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.

Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:

28-ED41D



ED60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:

28-ED60

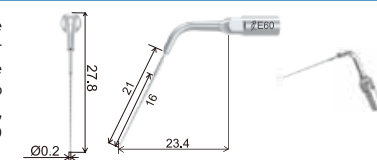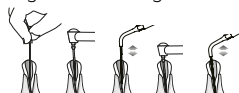


ED62 (TD6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Ø 0,3mm; taper: 0%; largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-ED62

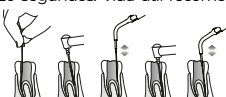

ED87 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



ED87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:

- 1.- extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" la lima rota tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.
- 2.- Eliminar lima rota.
- 3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-ED87



ED88 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



ED88 o **Takana- V**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-ED88



ED89 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



ED89 o **Katana- H**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-ED89




GD20 | Tallado hombro



Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.

Ref.:

28-GD20

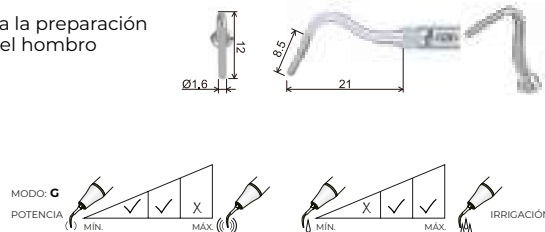


GD21 | Tallado hombro



Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina. Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.

Ref.:


28-GD21

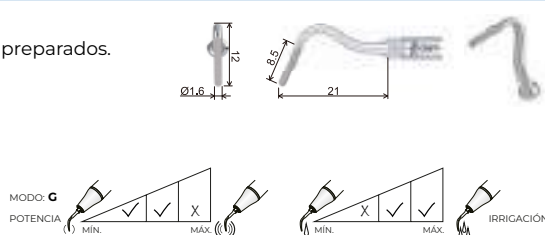

GD30 | Tallado de fosas y fisuras




Punta diamantada (90um) para la preparación entre pozos y fisuras.

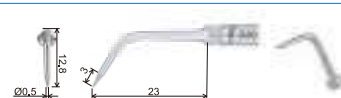

Ref.:

28-GD30

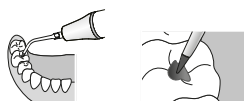

GD31 | Tallado hombro especial cavidad mesial



Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad mesial.



Ref.:

28-GD31



GD32 | Tallado hombro especial cavidad distal




Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad distal.



Ref.:

28-GD32

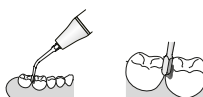

SBD1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello



Punta diamantada (85um). Diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque la punta en la fosa y desplácela lentamente ejerciendo una ligera presión.



Ref.:

28-SBD1



SBD2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial




Punta de media bola diamantada (85um). Diseñada para eliminar la caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SBD2

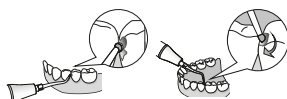

SBD3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



Punta de media bola diamantada (85um). Diseñada para eliminar caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.



Ref.:

28-SBD3





ED8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø = 1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en dientes anteriores. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED8

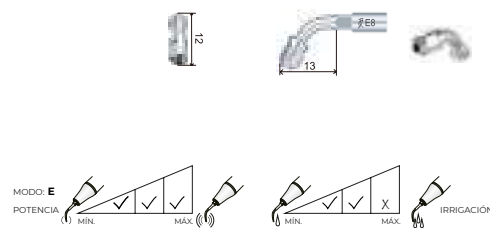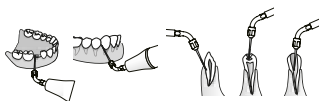



ED9 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø = 1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en molares. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED9

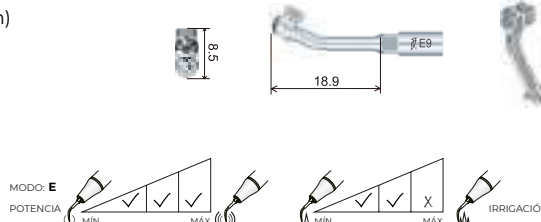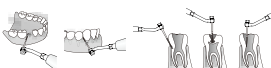



PD40 | Perio implantes, Endochuck



Endochuck / adaptador para sujetar las puntas de mantenimiento de implantes PD41, PD42, PD43L y PD43R para limpiar y mantener el implante.

Ref.:

28-PD40

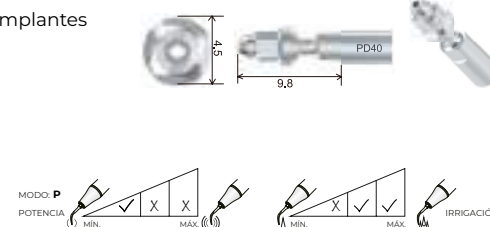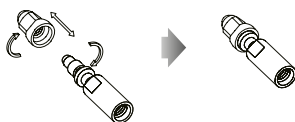


PD41 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival. **Necesario Adaptador / Endochuck:** PD40.

Ref.:

28-PD41

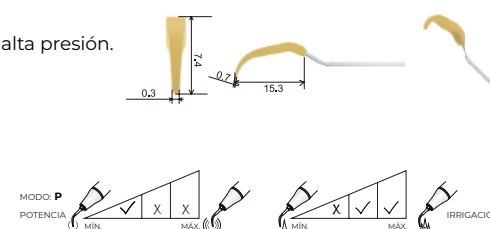


PD42 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival. **Necesario Adaptador / Endochuck:** PD40.

Ref.:

28-PD42

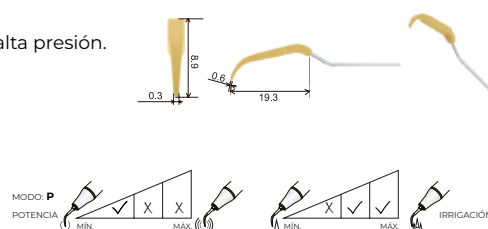


PD43L | Perio implantes, izquierda



Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal. **Necesario Adaptador / Endochuck:** PD40.

Ref.:

28-PD43L

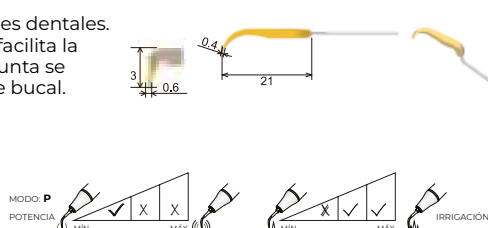

PD43R | Perio implantes, derecha





Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.

Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.

Ref.:

28-PD43R

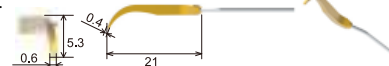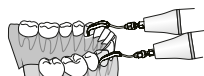

PD90 | Perio implantes



Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta. Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental. Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.

Ref.:

28-PD90



ROSCA TIPO S

RUMAR

SICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-SICP

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Set puntas PEEK, 10 uds.

Ref.:

44-ICPpeek

ULTRASONIDOS WOODPECKER® U600 Y OTROS COMPATIBLE EMS




G1 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G1
28-5G1

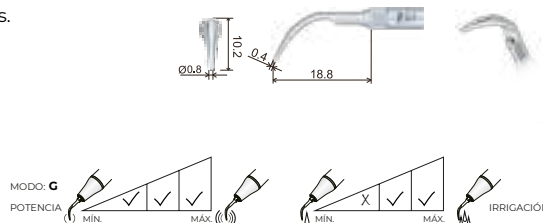


Ti G1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G1T


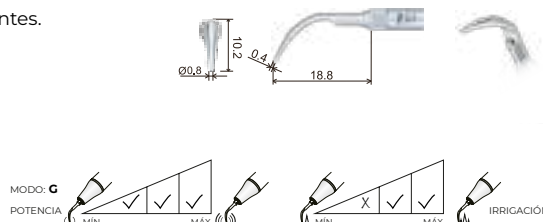


G2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G2

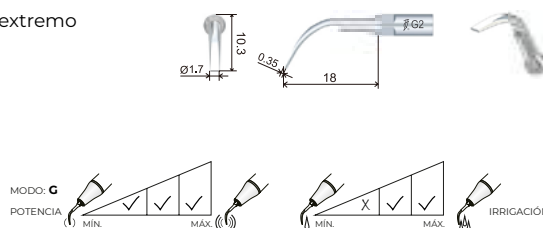
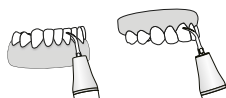


Ti G2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes



Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G2T

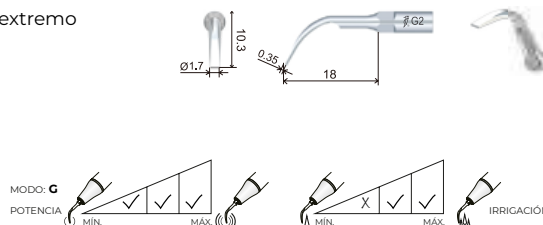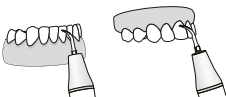


G3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos



Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:
28-G3

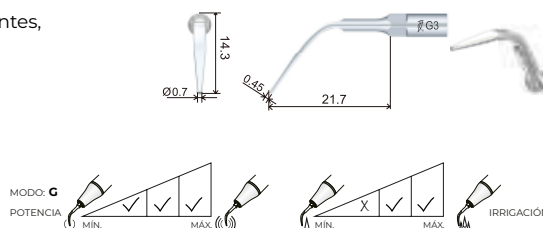

G4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4



Ti G4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales



Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4T




G5 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G5


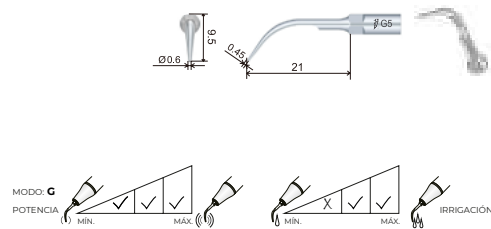


G6 | Profilaxis, depósitos supragingivales



Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G6

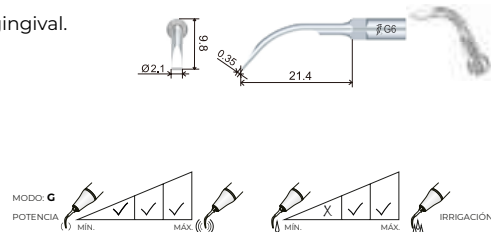
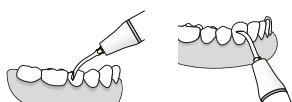


G10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello



Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-G10

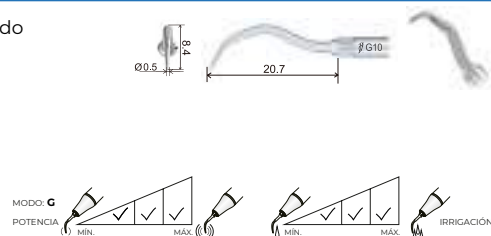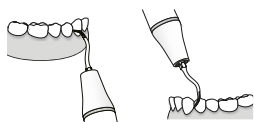


G12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales



Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G12

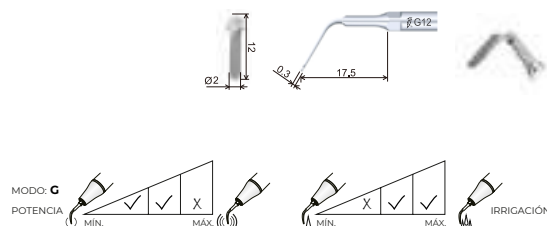


P1 | Perio, depósitos subgingivales



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-P1

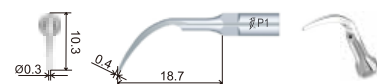


Ti P1T | Perio, recubrimiento Titanio



Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:

28-P1T

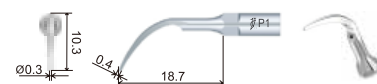

P2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:

28-P2L





P2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos



Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:

28-P2R

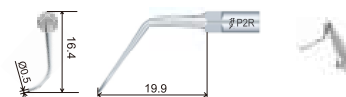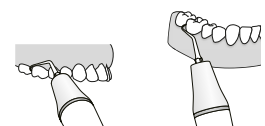


P3 | Perio, bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-P3

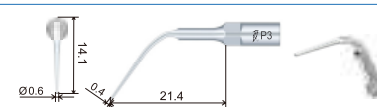


♦ P3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas



Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:

28-P3D

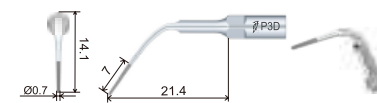

P3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3T





P4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:
28-P4

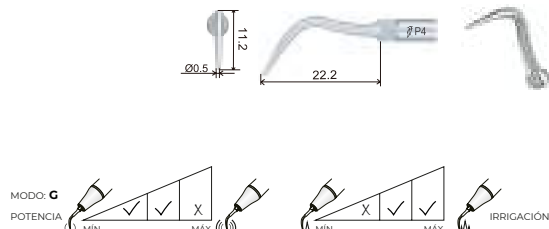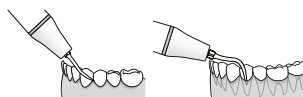


P4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular



Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular. También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular. No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:
28-P4D

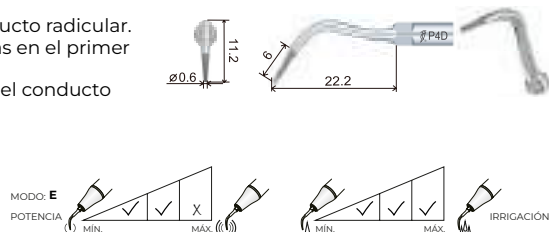


P4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas



Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:
28-P4T


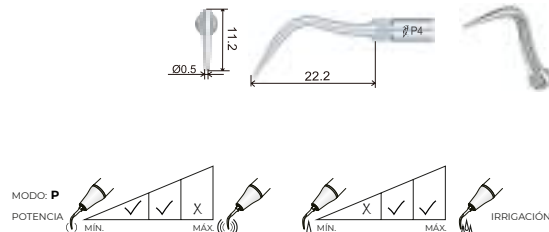


P5 | Perio



Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:
28-P5

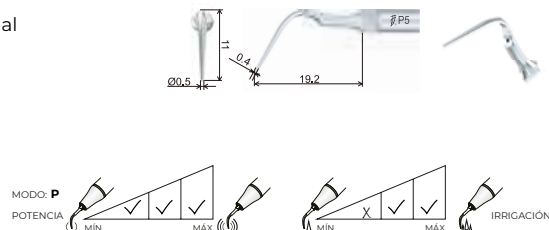
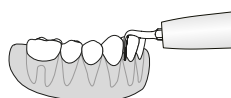


P6 | Perio, bolsas periodontales profundas



Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.


Ref.:
28-P6

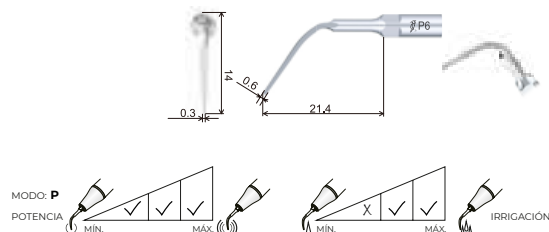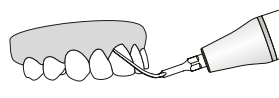




Ref.:

28-P7

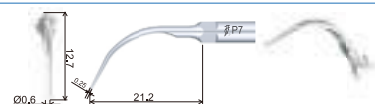

Ref.:

28-P8

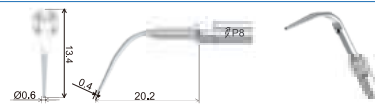



Ref.:

28-P10




Ref.:

28-P13

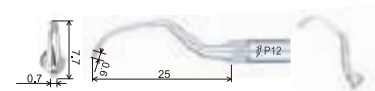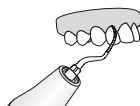


Ref.:

28-P1.

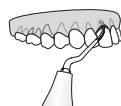

Ref.:

28-P14

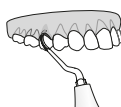


P20 | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en los dientes adyacentes, margen gingival del cuello y el cálculo en los primeros 3mm de la bolsa subgingival.

Ref.:

28-P20

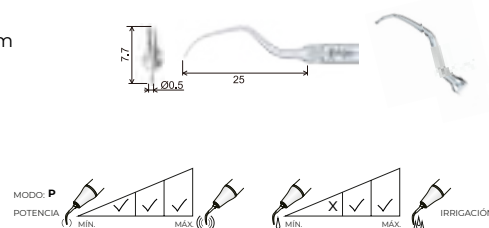


P22L | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales. Curvada hacia la izquierda.

Ref.:

28-P22L

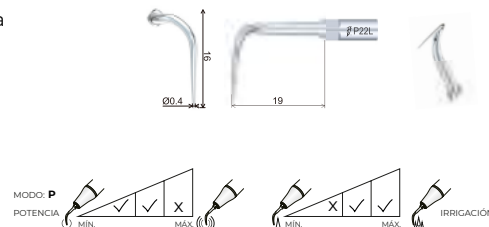


P22R | Perio, especial sarro bolsas periodontales



Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales. Curvada hacia la derecha.

Ref.:

28-P22R

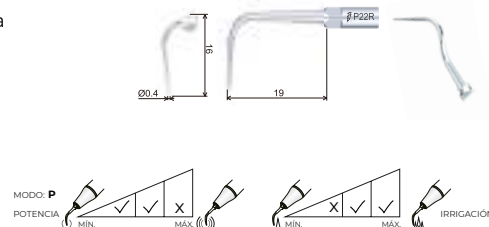

E1 (T1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)





Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E1

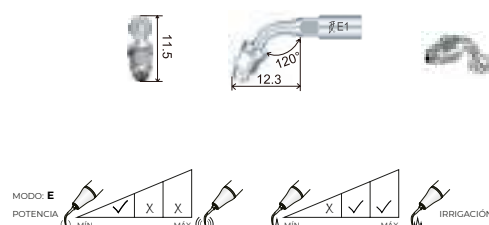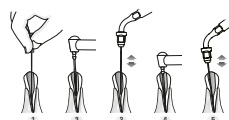



E2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)



Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm. Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:

28-E2

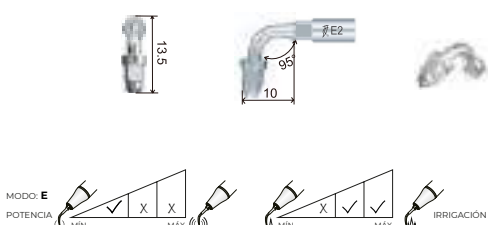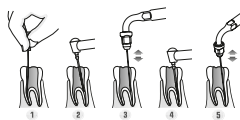

NiTi #15 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK (E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU15

NiTi #20 | Lima Endo

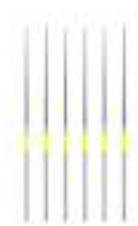

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU20

NiTi #25 | Lima Endo




Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU25

NiTi #30 | Lima Endo

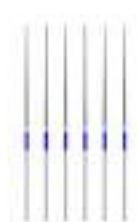

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU30

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU35



E3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha



Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active
el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-E3

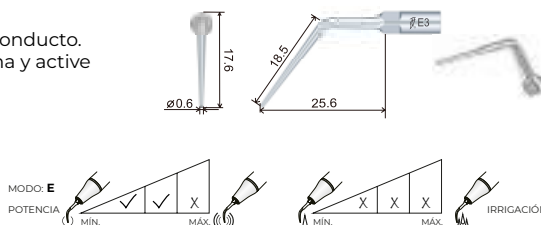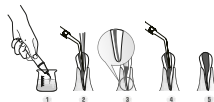



E3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-E3D

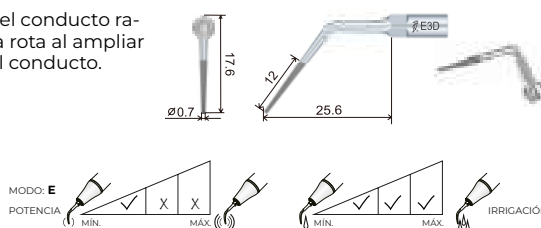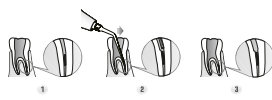



E4 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-E4

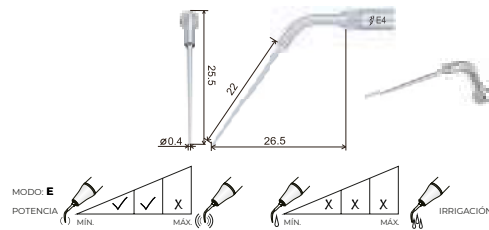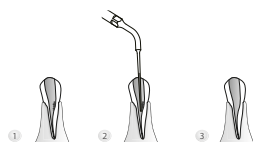



E4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos



Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-E4D

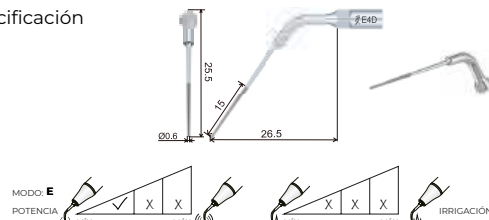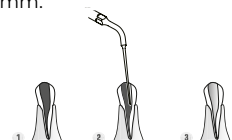



E5 | Endodoncia, especial obstrucciones



Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-E5

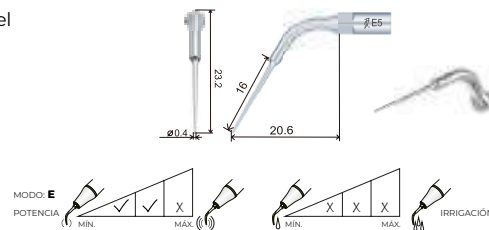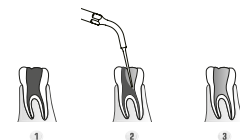



E5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.:

28-E5D

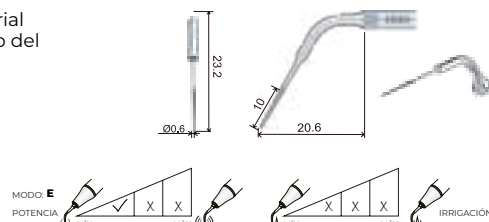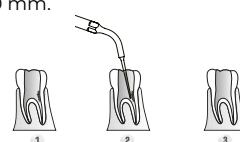

E6 (T6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas





Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E6

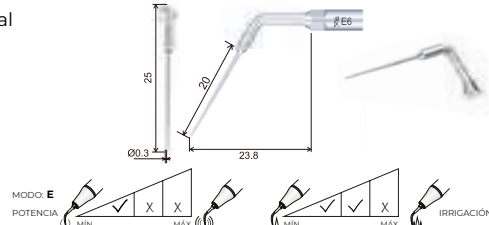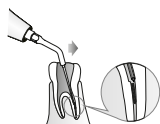



E10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-E10

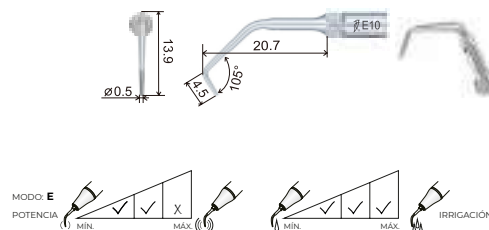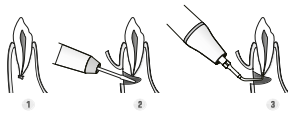



Ref.:



Ref.:



Ref.:

A diagram showing a dental procedure. A hand is holding a tooth with a preparation. A syringe-like applicator is dispensing a material into the preparation.



Ref.:



Ref.:



Ref.:

1 2 3



■ ◆ **E15D (T5)** | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos





Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E15D

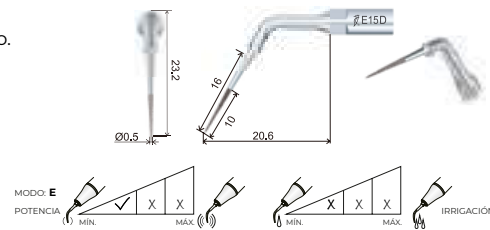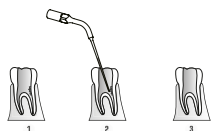

■ **E18 (T3)** | Endodoncia, especial primer tercio coronas




Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 micro-ranuras, para una buena capacidad de corte.

El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-E18

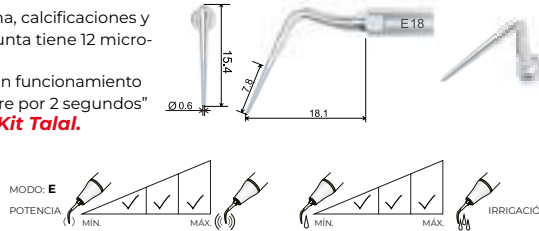


■ ◆ **E21LD** | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares. Doblada hacia la izquierda. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21LD

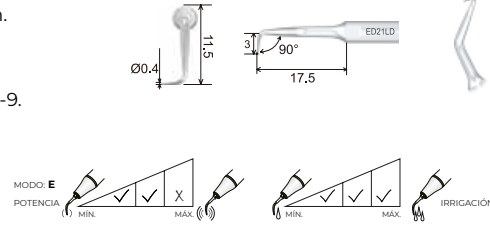



■ ◆ **E21RD** | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación



Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación. El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm. Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales posteriores. Doblada hacia la derecha. Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21RD

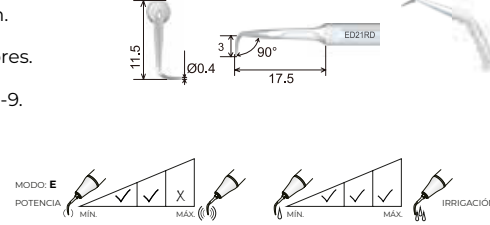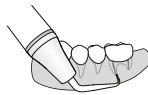



■ **E60** | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:

28-E60

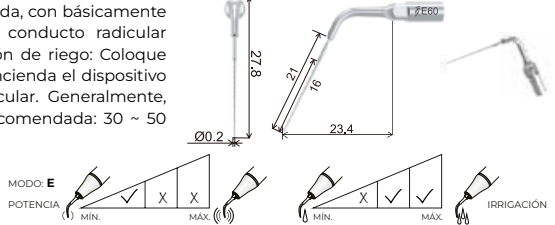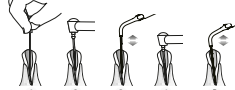



■ **E62 (T6)** | Endodoncia, irrigación de canal radicular



Ø 0,3mm; taper: 0%; largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 x 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. **Incluida en Endo Kit Talal.**

Ref.:

28-E62

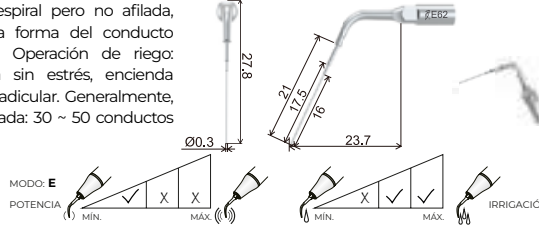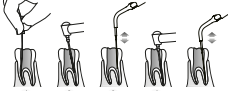

NUEVO

E87 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:

- 1.- extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" la lima rota tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.
- 2.- Eliminar lima rota.
- 3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-E87



NUEVO

E88 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E88 o **Takana- V**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-E88



NUEVO

E89 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E89 o **Katana- H**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-E89





G20 | Tallado hombro



Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.

Ref.:

28-G20

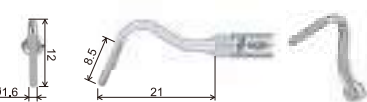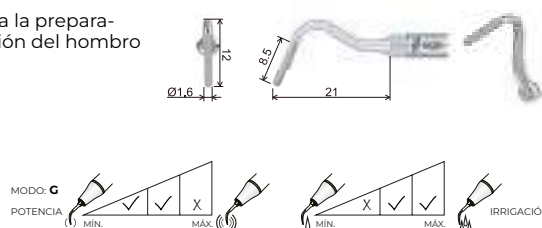



G21 | Tallado hombro



Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina. Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.

Ref.:

28-G21

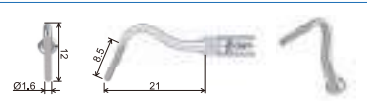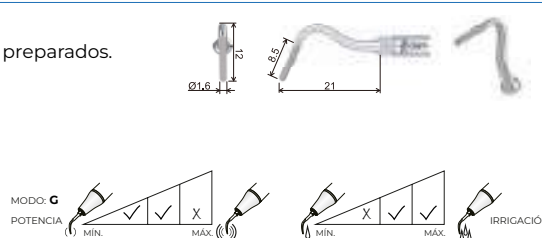


G30 | Tallado de fosas y fisuras



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación entre fosas y fisuras.

Ref.:

28-G30

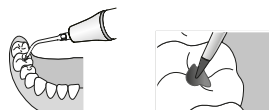

G31 | Tallado hombro, especial cavidad mesial



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad mesial.

Ref.:

28-G31




G32 | Tallado hombro, especial cavidad distal



Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad distal.

Ref.:

28-G32

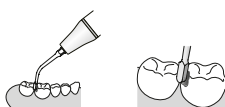

SB1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello



Punta diamantada (85um) diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque el instrumento en la fosa y desplácelo lentamente ejerciendo una ligera presión.

Ref.:

28-SB1




SB2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial



Punta diamantada (85um) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB2

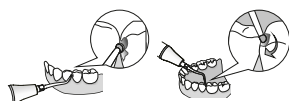


SB3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal



Punta diamantada (85um) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB3

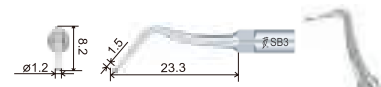



E8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)



Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø = 1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos. Normalmente utilizada en dientes anteriores. Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-E8

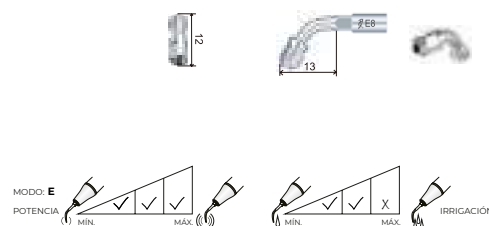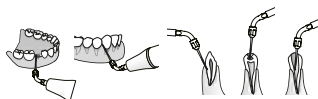



P90 | Perio implantes



Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta. Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental. Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.

Ref.:

28-P90

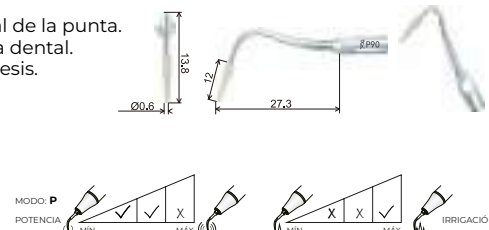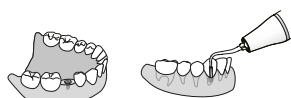



P94 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:

28-P94

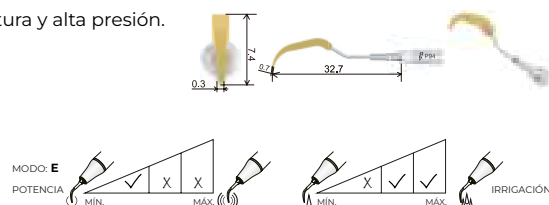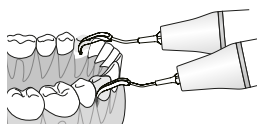



P95 | Perio implantes



Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes. Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión. Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:

28-P95

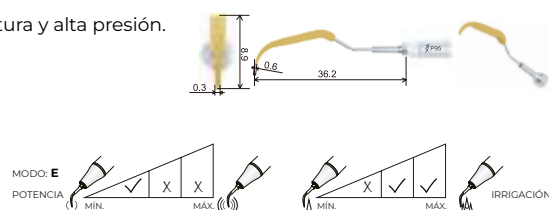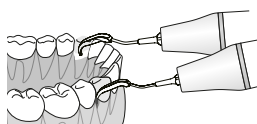

EMS Y COMPATIBLES

RUMAR

eICP | Profi Implantes (Punta soporte + 1 punta PEEK)



Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-eICP

ICPpeek | Set punta PEEK, 10 uds.



Ref.:

44-ICPpeek